

Janosch
by beurer

H

JB Y 80



H BÉBIMÉRLEG Használati utasítás

CE



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218
89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144
Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

Tisztelt Vásárló!

Örömrre szolgál, hogy kínálatunk egyik termékére esett a választása. Nevünk kiváló minőségű és többszö-
rösen bevizsgált minőségi –a hő, kémelóterápia, vérnyomás/diagnóziis, testsúly, masszázis és levegőtisztítás
területén használatos – termékeket fémjelez.

Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizték meg a későbbi használatra, tegyék más
használok számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözlettel:
Az Ön Beurer-csapata

! Fontos adatok

1. Vigyázat

- A mérleget óvni kell az ütéstől, nedvességtől, portól, vegyszerektől, erős hőmérséklet-ingadozásoktól és a túl közeli hőforrásoktól (kályhák, fűtőtestek).
- A javítások csak a kijelölt szakszervizben, vagy az arra jogosult kereskedőknél végezhetőek el.
- Minden mérleg megfelel az EG 2004/108-os szabványnak +kiegészítésekkel. Ha készülékünk használatával kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük forduljon kereskedőjéhez, vagy a kijelölt szakszervizhez!
- Tisztítás: a mérleget egy megnedvesített kendővel tudja megtisztítani, amire szükség esetén némi moso-
gatószert vigyen fel. A mérleget sose merítse vízbe, és sose öblítse le folyó víz alatt!
- Figyelmeztetés: Ne helyezzen tárgyakat a mérlegre, amikor azt nem használja!
- A mérleg pontosságát az erős elektromágneses mezők (pl.: mobiltelefonok) befolyásolhatják.
- A mérleg terhelhetősége maximum 20 kg (44 lb, 704 oz). Súlymérés esetében az eredményeket 5 g-kénti
(0.02 lb, 0.20 oz) osztásban jelzi.
- Állítsa a mérleget egy szilárd, sík felületre, a szilárd alap a pontos mérés feltétele.
- A mérleget nem ipari használatra tervezték.
- Az esetleg előforduló szállítási rögzítést távolítsa el!


2. Használat

2.1 Elem

A mérleg működtetéséhez 2 db 1,5 V-os Mikro AA elem szükséges. Ezeket a gyermek-
mérleg üzembe helyezése előtt, a polaritás szerint be kell helyezni a mérleg alján lévő
akkudobozba. Ha a kijelzőn „LJ” jelenik meg, az elemeket újakra kell cserélni.

A használt elemek nem tartoznak a házi szemétbe. Adja le azokat egy elektromos szak-
üzletben, vagy a helyi hasznosanyag-gyűjtő helyen, mert ezeket az átvételre törvény
kötelezi.

Jelölések: Ezeket a jeleket találja a káros anyagokat tartalmazó elemeken: Pb = az elem
ólmot tartalmaz, Cd = Az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz.

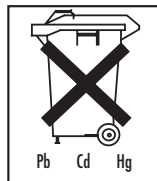

2.2 Mérés

A súly 50 g minimális értéktől kezdve 5 g-os lépésekben jelenik meg.

A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a gombot „”.

Amint a kijelzőn megjelenik a „0.000 kg”, a mérleg készen áll a mérésre.

Helyezze a babát a mérőfelületre. Ennek során legyen nagyon óvatos, ne ejtse le a kisbabát és ügyeljen a fejére.

A babamérleg „HOLD” tároló funkcióval rendelkezik (AUTO HOLD és MECHANICAL HOLD). Az AUTO HOLD funkció rögzíti a baba súlyát, amint elég nyugodtan fekszik a pontos mért érték rögzítéséhez. Ha a baba túl erősen mozog, nem lehet megmérni. Ezért próbálja megnyugtatni a rugdalózó babát, hogy gyorsan megmérhesse. Ne érjen azonban a babához, hogy ne befolyásolja a súlymérést.

Amint stabilizálódik a gyermek súlya, megszűnik a „HOLD” kijelzés villogása és a mérleg 20 másodpercig kijelzi a súlyt. Ezután a mérleg automatikusan kikapcsol.

Amennyiben a baba igen erősen rugdalózik, a „HOLD” gomb megnyomásával a MECHANICAL HOLD funkciót választhatja ki. 3 másodperc elteltével a „HOLD” kijelzés villogása megszűnik és a mérleg 20 másodpercig kijelzi a súlyt.

Amennyiben Ön a babát nem kívánja közvetlenül a mérleglapra fektetni, hanem például egy törölközőre, akkor a törölközőt bekapcsolás ELŐTT kell a mérlegre helyezni. Amennyiben a törölköző és más súlyok, melyeket Ön a méréskor újból le kíván vonni, nehezebbek 50 g-nál, akkor használhatja a TARA-funkciót is. A „TARA” gomb megnyomása után megjelenik a kijelzőn a tare. Nyomja meg a TARA gombot, ha a levonandó súlyokat megmérte, és villog a “Hold”. Ekkor tegye a babát a mérlegre, és folytassa a mérést a fent ismertetettek szerint.

A mérleg 0.000 g-ra való visszaállításához nyomja meg a TARA gombot, ha már nem villog a „HOLD”.

A mérleg gyári állapotában „kg”-os egységre van beállítva. A „kg/lb/oz” gombbal bármikor át lehet állítani az egységet kilogrammra „kg”, fontra “lb” és unciára „oz”.

2.3 Leselejtés

Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes helyi szervekhez.



